

OnScreenKeys Priročnik za uporabo



Opis

Programske opreme OnScreenKeys je podpora tehnol

Navidezne tipkovnice OnScreenKeys zagotavlja vse

Namesto da pritisnete eno od tipk za normalno tipk

OnScreenKeys Zagotavlja integrirano miško kliknit

Veliko bolj integrirane delovne značilnosti bo na

Programska oprema vključuje integrirano glasovno p Vključitev dodatnih glasov od drugih podjetij, kot



Namestitev

Namestitev s CD-ja

Če OnScreenKeys je bila izdana na CD-ju, da je v Namestitev se bo začel samodejno.

Če namestitev ne zažene samodejno:

Prvi zagon

OnScreenKeys Samodejno zazna jezik, ki ste ga nav
Lahko pa tudi spremenite jezik obvestil na tipkovn



Tipkanje

Urejevalnik besedil okno

Moraš odpreti besedilno okno, da se lahko v vrsto. Za predstavitvene namene besedilno okno se odpre s

Kakršna koli izvršljiva datoteka se lahko ustanovi


Lahko vrsta v katerem koli urejevalniku besedil po

Prosimo, upoštevajte, da se (tako kot pri tipkati




Kako kliknite tipke in gumbi

Za priklic tipk na tipkovnici pritisnete navzdol s Času, preden je sprožila ključno lahko svobodno pr

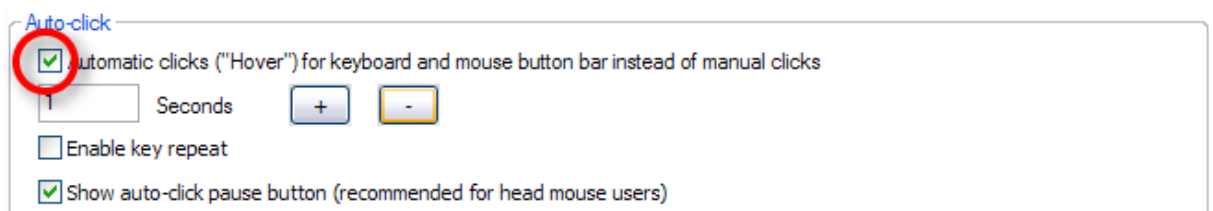

Autoclick gumb

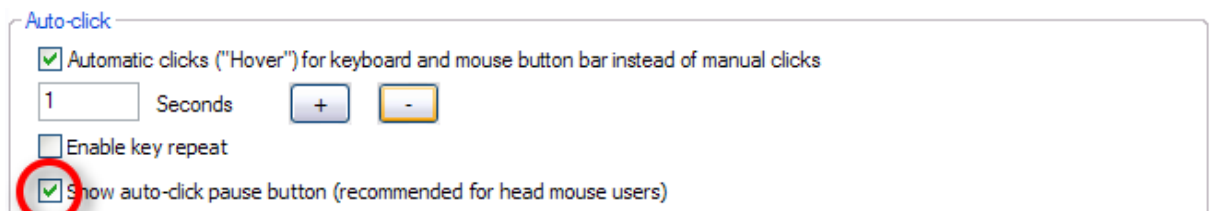

Vodja miško uporabniki lahko dobiček iz autoclick-

Če želite spremeniti svoje stališče na stolu ali s S klikom na "Auto-kliknite gumb" enkrat, lahko izk

I	Iz	Imajo	Imeli	Imeti
In	Ima	Imam	Izbrala	Informacije

Besede

Kakor hitro ste vpisali prvo črko novo besedo, bes Če l'elena besedo se prikaŕe, lahko izberete samo,

OnScreenKeys Zagotavlja trojno besede. To pomeni, da je programska oprema bo poskušal pre Takoj, ko boste videli l'elena besedo, lahko jo izb

Zgornji / spodnji primer

Mogoče boste opazili, da OnScreenKeys je poskušal Lahko povod za izdajo dovoljenja za premik gumb, d



Shift

Upoštevajte, da besede, ki so izbrani tako, da izb Telefon lahko nastavite tako, premik stanju z dvig

Če ŕelite spremeniti primeru zadnjega natipkano be



Word dvigalko



Popravek

Obstajata 3 zbrisati funkcij v programski opremi:



Izbriŕete zadnji znak















Uporabite ta gumb, da izbriŕete zadnji znak.



Izbriŕi zadnjo besedo

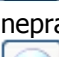Uporabite ta gumb, ŕe ŕelite izbrisati zadnjo bese

Drugi kljuŕi

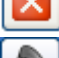-  Tab
 -  Word dvigalko
 -  Shift
 -  Escape tipko
 -  Caps Lock (Konstanta zgornjem primeru tipkanje)
 -  Windows
 -  Quick besedilo makro-ključ
 -  Izbrišite besedo od uporabnika besedo knjige: Če ste enkrat natipkano besedo nepravilno in ni pr Če želite izbrisati to besedo, izberite ta gumb, i
 -  CD pladenj: Odpre ali zapre CD pladenj.
 -  Autoclick gumb: S tem gumbom lahko izključite s funkcijo auto-klik
 -  Splošne nastavitve
 -  Minimirati
 -  Kon\u010Daj
 -  Glas: Vključite / izključite govora izhodno funkcijo
-

Zunaj, AltGr-in Ctrl-Key



Podaljša ključe

S klikom na dodatno tipko na virtualno tipkovnico



Tipko AltGr -

Na tipko AltGr se uporablja za pisanje posebne zna



Ctrl-ključ


Tipko Ctrl, se ne uporabljajo za tako imenovano"k

Učinek kratko frizuro je odvisna od uporabe ga upo

O prilagoditvi tipkovnice

Več jezikov

Ljudi, ki govorijo več jezikov, bo dobiček iz"lan
Privzeta nastavitve je, da bo uporabljal programsk

Če l'elite začasno zamenjati jezik, sprožitvene nas 
Izberite zeleni jezik od enega izmed praznih izbir

Če želite preklopiti na jezik tipkovnice, boste mo



Jezik (Splošne nastavitve)

Če želite spremeniti jezik, ki se bodo uporabljali

[Standard language for word prediction and menus](#)


Englisch (USA)

Language for menus and dialogs in this software. This language will also be as the primary language for word prediction.

Tipkovnica velikosti

Velikost tipkovnice lahko spremenite v meniju konf

[Keyboard size](#)

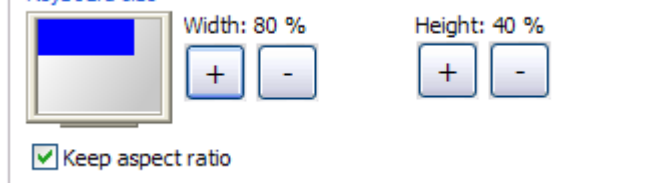

V modrem pravokotniku prikazuje velikosti glede na

Uporabniško določene ključe

Obstajajo 4 tipk na tipkovnici, ki jih je mogoče n

[Typing](#)

Additional letters to be displayed on the keyboard:

sch , . ?



Govor izhodno

Prosimo, upoštevajte, da se ta funkcija na voljo l

S to tipko lahko vključite ali izključite govora i

Glede na trenutno stanje, na naslednji simboli so



Govor izhod je izključena.



Govor izhod se aktivira.



Govor izhod je izključena zaradi napake.

Če je govor output je funkcija, vsako natipkano vr



Sprožilna tipko Enter, znova brez kakršne koli nov

Govorijo vsak posamezni besedo

Če je možnost "Govori enotno besedilo" se aktivira

Če ta možnost ni bila vključena, zadnja vrstica na

Če želite izbrati zvočni izhod za govor, se lahko
Prosimo, upoštevajte, da boste morali sprožiti "Sh
Če uporabljate programsko opremo za več kot enem j
Če spremenite jezik tipkovnice jezik, ki ga sproži



Gumbom miške bar




Prosimo, upoštevajte, da se ta funkcija na voljo l

Če imate težave s pritiskom na gumbe iz resničnega
Uporaba navideznega gumba miške lahko malo poznajo
Najprej bi morali upoštevati vsi, ki vas bo gumb z
Na primer, če želite odpreti besedilno datoteko, k
Izberite leleno miške kliknite, nato premaknite ka

Miške kliknite funkcijo



Dvokliknite

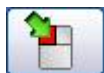

Levi klik



Desni klik



Povleci / Spusti klik



Ponovi povleci / spusti klikov
(for games like e. g. Spider Solitaire)



Izključi in zmanjša gumbom miške bar.



Maksimiziranja gumbom miške bar.

2 vrednote lahko pomembno, da se udobno delo z miš




- 1) Zadrževalni čas**
Zadrževalni čas pomeni časovno obdobje, preden kli



- 2) Gibanje strpnosti**
Če imate težave z ohranjanjem miškeinega kazalca še

Gumbom miške bar velikosti

Velikost gumbom miške na vrstico lahko spremenite

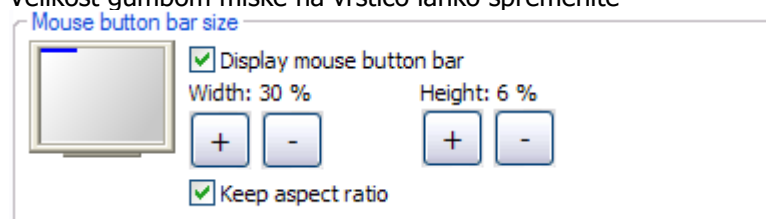


V modrem pravokotniku prikazuje velikosti glede na

Compensation for spasticities

Prosimo, upoštevajte, da se ta funkcija na voljo l

Make real computer mouse ignore clicks.

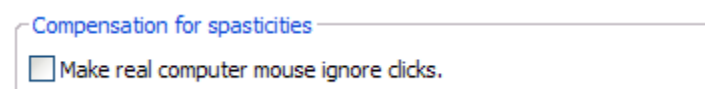

This option causes the mouse to ignore clicks.

Mouse clicks on e. g. the desktop can only be triggered by the mouse click bar.

This option can compensate for spasticities in hand which may lead to unwanted dragging of files into e. g. the recycle bin.

When this option has been activated, the Escape key on the computer keyboard can be used to deactivate or to resume the ignoring of mouse clicks of the computer mouse.

Besedilo makre

Quick besedilo makro-ključ



Ki jih sprožijo "hitro besedila makro-ključ", se n
Ko boste sprožili eno izmed teh naslovov, se vnapr
Naslov in vsebina besedila makre se lahko dodelijo
Lahko na primer ustvarite makro besedilo z naslovo

Besedilo makre

Od 10 hitrih text-makre, lahko malo premalo usposo
To besedilo se lahko makre, ki jih zahteva tipkanj
Eden od možnih načinov podajanja besedila, imena m
Združevanje je dober način za vodenje vašega besed
Na primer vse besedilo makre, ki so povezani s hra
Tako lahko ustvarite imena, ki jih je mogoče zlahk



Besedišče,

OnScreenKeys Zagotavlja obširen slovar po privzet
Programske opreme, se uči novih besed in stavkov, Kakorkoli že, je morda dobro odločitev v
nekaterih
Uporabite besednjak uvozne funkcije v nastavitvene

Dodatki

Autostart

OnScreenKeys Lahko nastavite tako, da se zažene s

Autostart

Open keyboard automatically when Windows® starts up

Barvna shema

Barvne sheme programske opreme lahko spremenili za

Colors

Standard colors

Black/ White


Foreground color

Background color

Auto-click color

A 5x10 grid of color swatches. The first row contains 10 dark colors (black, brown, olive, green, blue, dark blue, purple, grey). The second row contains 10 bright colors (red, orange, yellow, light green, cyan, blue, purple, grey). The third row contains 10 lighter colors (pink, light orange, yellow, light green, light blue, light purple, grey). The bottom right cell of the grid is a dashed box.

Preview

A rectangular button with a green background and a yellow letter 'A' in the center.

Zvok

Zvočni izhod za proženje tipke lahko vključen ali

Sound

Play sound when keys are triggered



Odpravljanje težav

Za kakršna koli zahteva dodatne informacije ali po