

OnScreenKeys Bruger håndbog



Beskrivelse

Programmet OnScreenKeys er et teknologisk hjælpemiddel for personer der ikke er i stand til at anvende almindelig computertastatur- eller mus på grund af et handicap.

Det virtuelle tastatur OnScreenKeys har alle de funktioner du normalt anvender på et rigtigt tastatur, samt mange andre funktioner, der gør alle former for computerbetjening meget lettere.

I stedet for at skrive på tasterne på et almindeligt tastatur, bevæger brugeren blot musemarkøren over tasterne på det virtuelle tastatur og kan derved let skrive i et hvilket som helst tekstområde på computerskærmen.

OnScreenKeys har en integreret museklik-funktion, der gør det muligt for en hvilken som helst bruger at udføre museklik, selvom de ikke længere er i stand til at klikke på knapperne på en almindelig mus.

Mange flere integrerede funktioner vil gøre arbejdet med computeren lettere.

Softwareen inkluderer et integreret stemmeoutput, som kan bruges til at sende skrevet tekst ud som lyd gennem højttaleren. Integration af yderligere stemmer fra firmaer som AT&T, Acapela er mulig.



Installation

Installation fra CD

Hvis OnScreenKeys er blevet tilsendt på en CD, skal du indsætte den i computerens CD-rom drev. Installationen vil starte automatisk.

Hvis installationen ikke starter automatisk:

Hvis installationen fra CD'en ikke starter automatisk, skal filen OnScreenKeysSetup.exe startes manuelt fra CD'en.

Første start

OnScreenKeys finder selv ud af hvilket sprog du har valgt som standard i Windows®, og konfigureres automatisk til denne indstilling.

Du kan skifte sprog for keyboardet og mange andre ting ved at ændre i konfigurationsmenuen, som kan findes ved at trykke på knappen for indstillinger på keyboardet:



Computerskrivning

Tekstbehandlingsprogram-vindue

Du skal åbne et tekstvindue som du kan skrive i. Af demonstrationsårsager åbnes der automatisk et tekstvindue når softwaren startes.

Enhver eksekverbar fil kan sættes til at starte automatisk når OnScreenKeys startes.


Du kan bruge et hvilket som helst tekstprogram, for eksempel Microsoft Word® eller E-mail software.

Husk venligst at musemarkøren (ligesom når du taster normalt på et computerkeyboard) skal blinke i vinduet.



Hvordan man klikker på taster og knapper

For at trykke på taster uden at holde musetasterne nede manuelt, skal autoklik ("svævefunktionen") være aktiveret. Tiden før en tast aktiveres automatisk kan frit justeres.

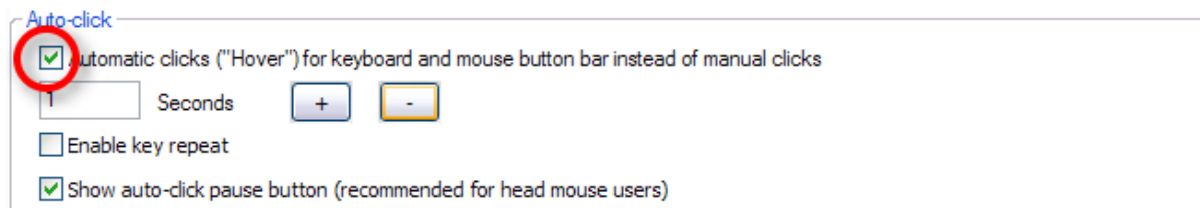

Autoklik pause knap

Auto-click

Automatic clicks ("Hover") for keyboard and mouse button bar instead of manual clicks

1 Seconds

Enable key repeat

Show auto-click pause button (recommended for head mouse users)

Hovedmus-brugere har muligvis gavn af autoklik-pause funktionen. Hvis denne indstilling er valgt, vil knappen for autoklik-pause være synlig på tastaturet.

Hvis du vil ændre din siddestilling eller bare dreje hovedet, vil musemarkøren flytte sig henover computerskærmen på grund af bevægelsen. Dette vil muligvis trykke uønsket på nogle taster. Ved at klikke på "Autoklik pause knappen" en enkelt gang, kan du deaktivere tastaturets autoklikfunktion indtil denne knap bliver trykket på igen.

A	Af	Alle	Andet	Aldrig
At	Alt	Andre	Anden	Allerede

Autofuldførelse

Så snart du har skrevet det første bogstav i et ord, vil autoudførelsesforslag blive vist. Hvis det ønskede ord er vist, kan du vælge at få dette ord indtastet automatisk.

OnScreenKeys giver mulighed for tredobbelte ordforudsigelser. Dette betyder, at softwaren vil prøve at forudse det næste ord. Så snart du kan se det ord du vil indtaste, skal du vælge det.

Stort/ lille bogstav

Måske opdager du at OnScreenKeys forsøger at rette "caps lock" funktionen for keyboardet automatisk. Du kan bruge shift-knappen til at skifte status manuelt.



Shift tast

Bemærk at ord der er markeret ved at markere en af ordene fra ordforudsigelsesknappen vil blive skrevet præcis som de er ser ud på skærmen. Du kan skifte shift statusen med shift-knappen inden du vælger et ord.

Hvis du vil ændre skriftstørrelsen fra det sidst skrevne ord, skal du trykke på følgende knap:



Ord shift tast



Korrektur

Der er to slettefunktioner i programmet:



Slet sidste bogstav

Brug denne knap til at slette sidst skrevne bogstav.



Slet sidste ord

Benyt denne tast til at slette det sidste ord

Andre taster



Tab



Ord shift tast



Shift tast



Escape tast



Caps lock (Permanent skrivning med store bogstaver)



Windows



Hurtig tekst-makro tast



Slet ord fra brugerordbogen: Hvis du én gang har indtastet et ord ukorrekt, og ikke rettede det, vil det forekomme i ordforudsigelsen igen. For at slette dette ord skal du vælge denne knap og så klikke på den knap der viser det ukorrekte ord.



CDrom drev: Åbner eller lukker CD-bakken.



Autoklik pause knap: Med denne tast kan du deaktivere tastaturets autoklik funktion. Når autoklik funktionen er deaktiveret kan den kun aktiveres igen ved hjælp af denne tast.



Generelle indstillinger



Minimer



Afslut



Voice: Aktivér/deaktivér talefunktionen

Ekstra-, AltGr- og Ctrl-tasten



Udvidede taster

Ved at klikke på ekstra-tasten på det virtuelle keyboard kan du få adgang til alle specialfunktionerne der eksisterer på et normalt keyboard.



AltGr-tast

AltGr tasten bliver brugt til at skrive specialtegn.



Ctrl-tast

Ctrl tasten bliver brugt til "Genveje".

En genvejs funktion afhænger af hvilket program du bruger den i.

Konfigurering af keyboardet

Adskillige sprog

Folk som taler flere sprog vil muligvis have gavn af "skift sprog funktionen". Den gør det muligt at hurtigt skifte sprogforudsigerens samt keyboardets layout. Som standard vil softwaren bruge det sprog som du har sat til standard i Windows.

Tryk på følgende tast for at skifte sprog midlertidigt:



Vælg det ønskede sprog fra en af de tomme kasser og klik derefter "Aktivér".

Hvis du ønsker at skifte tastatursprog igen, skal du bruge "sprogskift knappen" igen, og derefter klikke på "aktivér" tasten ved siden af det ønskede sprog.



Sprog (Generelle indstillinger)

For at skifte sprog i selve programmets menuer og dialogbokse, skal du vælge det ønskede sprog i konfigurationsmenuen.


[Standard language for word prediction and menus](#)

Englisch (USA)

Language for menus and dialogs in this software. This language will also be as the primary language for word prediction.

Tastaturstørrelse


Størrelsen af keyboardet kan ændres i konfigurationsmenuen.

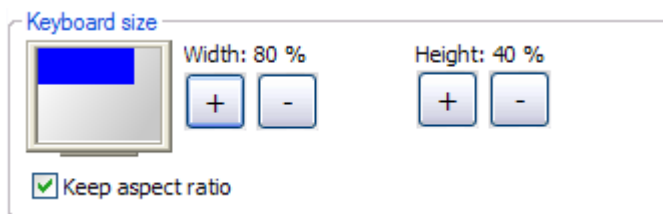

Det blå rektangel viser størrelsen i forhold til din computerskærm.

Brugerdefinerede taster

Der er fire taster på keyboardet, som kan fyldes med et hvilket som helst indhold fra konfigurationsmenuen.

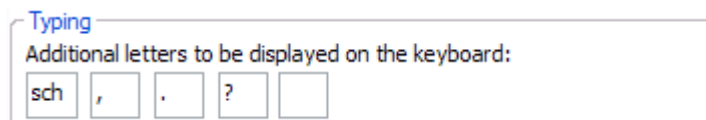

Tale-output

Bemærk venligst at denne funktion, efter prøveperioden, kun vil være tilgængelig hvis den indgår i den licens du køber.

Med denne tast kan du aktivere eller deaktivere stemmeoutputfunktionen.

Afhængigt af den nuværende status, er de følgende symboler vist.



Tale-output er deaktiveret.



Tale-output er aktiveret.



Tale-output er deaktiveret på grund af en fejl.

Hvis taleoutputfunktionen er aktiveret, vil alle skrevne linjer blive sendt til talefunktionen når du trykker på enter.



Hvis du trykker på enter-tasten igen uden at have skrevet noget nyt, vil den sidst skrevne sætning blive gentaget. Dette kan være godt, hvis du ikke har forstået sætningen korrekt.

Sig hvert eneste ord

Hvis indstillingen "Sig enkelte ord" er aktiveret, vil hver enkelt ord sendes til udtalefunktionen lige efter det er skrevet.

Hvis indstillingen ikke er aktiveret, så vil den sidst skrevne linje blive sendt til udtalefunktionen når der trykkes på enter.

For at vælge stemme til stemmeoutputtet, skal du gå ind i konfigurationsmenuen og skifte stemmen som er sat til det specifikke sprog.

Bemærk at du skal trykke på "Gem stemme" knappen som findes lige nedenunder stemmevalgs feltet, efter du har ændret sprog-stemme kombinationen.

Hvis du bruger softwaren til mere end et sprog, kan du vælge forskellige stemmer til hvert sprog.

Hvis du ændrer keyboardets sprog ved at trykke på 'skift sprog' knappen, vil stemmen du har tildelt til dette sprog automatisk være valgt som tale-output.



Museknappbjælke



Bemærk venligst at denne funktion, efter prøveperioden, kun vil være tilgængelig hvis den indgår i den licens du køber.

Hvis du har svært ved at trykke på knapperne på en rigtig mus, burde du bruge disse virtuelle museknapper.

Brug af de virtuelle musetaster er måske svært i starten, så her er en kort forklaring.

Først og fremmest skal du overveje hvilke knapper du ville bruge på en rigtig mus til at gøre det du vil gøre.

For eksempel skal du normalt dobbelt-klikke med venstre museknapp for at åbne en tekstfil.

Vælg det ønskede museklik og flyt derefter musemarkøren til det sted hvor museklikket skal udføres.

Museklik funktion



Dobbeltklikket



Venstreklik



Højreklik



Træk/ Slip klik



Gentagende træk-og-slip klik

(til spil som f.eks. 7-kabale)



Deaktiver og minimer museknappe bjælken.



Maksimer museknappe bjælken.

Der er to indstillinger som kan være vigtige for at du kan arbejde komfortabelt med museklik funktionen:



1) Dvaletid

Dvaletid betyder det tidsrum før museklikket bliver udført ved musens nuværende position.




2) **Bevægelsestolerance**

Hvis du har problemer med at holde musemarkøren stille, bør du forhøje bevægelsestolerancen.

Størrelse på museknappbjælke

Størrelsen af museknapp bjælken kan ændres i konfigurationsmenuen.

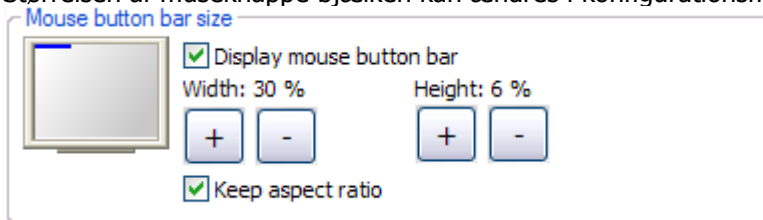


Det blå rektangel viser størrelsen i forhold til din computerskærm.

Kompensation for spastiske lidelser

Bemærk venligst at denne funktion, efter prøveperioden, kun vil være tilgængelig hvis den indgår i den licens du køber.

Tving den rigtige computermus til at ignorere klik.

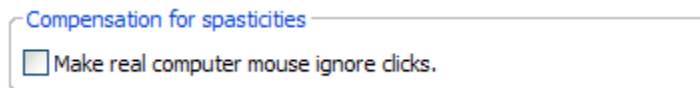

Med denne indstilling ignorerer musen alle klik.

Museklik på f.eks. skrivebordet kan kun foretages med musekliksbjælken.

Denne indstilling kan kompensere for spastiske lidelser i hånden, som kan føre til at trække filer utilsigtet i f.eks. papirkurven.

Når denne indstilling er aktiveret, kan escape-tasten på computerens tastatur bruges til at stoppe eller fortsætte med at ignorere museklik med computermusen.

Tekstmakroer

Hurtig tekst-makro tast



Ved at trykke på 'Hurtig tekst-makro tasten', vil titlerne på hurtig tekst-makro tasterne blive vist på tastaturet.

Hvis du trykker på en af disse titler, vil det forudindstillede indhold af denne makro blive indtastet.

Titler og indhold af tekstmakroer kan blive tildelt eller ændret i konfigurationsmenuen. Du kan for eksempel lave en tekstmacro med titlen 'Farvel' og tildele 'Farvel!' som indhold.

Tekstmakroer

Da 10 hurtig-tekst makroer måske vil være for lidt for en øvet bruger, er det muligt at tilføje flere tekstmakroer, som kan aktiveres ved bestemte tastekombinationer.

Disse tekstmakroer kan frembringes ved at taste "#" på tastaturet.

En måde at give tekstmakroerne navne på er ved at bruge forkortelser.

Gruppering er en god måde at holde tekstmakroer arrangeret på.

For eksempel kan alle tekstmakroer der har noget med mad at gøre starte med 'Mad:'.

På denne måde kan du lave navne som let kan genkendes, såsom 'Mad:Salat',

'Mad:Brød', osv.



Ordliste

OnScreenKeys har en omfattende ordbog indbygget.

Softwareen lærer nye ord og sætninger når du skriver dem og tilpasser sig din skrivestil. I


nogle tilfælde kan det anbefales at lade softwaren importere egne dokumenter, så programmet med det samme kan lære din skrivestil.

Brug ordforråds-import funktionen i konfigurationsmenuen for at importere dine tekstdokumenter.

Ekstra

Autostart

OnScreenKeys kan konfigureres så det automatisk starter når Windows starter.

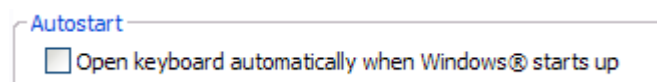

Farvepalet

Farvetemaet i softwaren kan ændres, for at farveblinde også kan bruge det.

Colors


Standard colors

Black/ White


Foreground color

Background color

Auto-click color

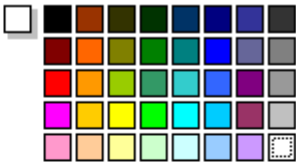

Preview



Lyd

Lydoutput ved tastetryk kan aktiveres eller deaktiveres.

Sound

Play sound when keys are triggered



Problemløsning

Har du forespørgsler eller ønsker du yderligere information bedes du sende en e-mail til info@onscreenkeys.com.