

OnScreenKeys Manual de uso



Descripción

OnScreenKeys es un programa para asistir a las personas, que debido a una incapacidad, no pueden usar un teclado o ratón común.

El teclado virtual OnScreenKeys provee todas las funciones que normalmente se utilizan en un teclado real, más otras prestaciones que hacen cualquier trabajo de computación mucho más sencillo.

En lugar de presionar las teclas de un teclado normal, el usuario simplemente mueve el cursor por encima de las teclas del teclado virtual, y puede sencillamente escribir en cualquier cuadro de texto en la pantalla.

OnScreenKeys incluye una función para hacer clicks de ratón, que habilita a cualquier usuario a hacer clicks de ratón por sí solos, incluso cuando no sean capaces de presionar los botones de un ratón normal.

Muchas más características integradas harán más fácil el trabajo en el computador.

El software incluye una salida de voz integrada, que puede ser usada para enviar texto escrito a los parlantes del computador. Integración de voces adicionales de otras compañías como AT&T, Acapela es posible.



Instalación

Instalación desde CD

Si OnScreenKeys fue enviado en un CD, coloque el CD en la Unidad de CD de su computador. La instalación iniciará automáticamente.

Si la instalación no inicia automáticamente:

Si instalación desde el CD no inicia automáticamente, OnScreenKeysSetup.exe en el CD debe ser iniciado manualmente.

Primer inicio

OnScreenKeys automáticamente detecta que idioma usted ha especificado como idioma estándar en Windows y configura este software de acuerdo a este. Usted puede cambiar el idioma para el teclado así como otros ajustes accediendo al menú de configuración, al que puede ingresar usando el botón de ajustes del teclado:



Escribiendo

Ventana de editor de texto

Usted necesita abrir una ventana de texto en la que pueda escribir. Para propósitos de demostración se abre una ventana de texto automáticamente cuando el software está siendo iniciado.

Cualquier archivo ejecutable puede ser puesto a disposición para iniciar automáticamente cuando OnScreenKeys esté siendo iniciado.


Usted puede escribir en cualquier editor de texto de su elección, por ejemplo, Microsoft Word, o software de correo electrónico.

Por favor recuerde que (como cuando se escribe con un teclado normal de computador) el cursor debe estar titilando dentro de la ventana.




Como dar click sobre teclas y botones

Para disparar teclas en el teclado automáticamente sin presionar los botones del ratón manualmente, la función de auto-Click ("Hover") debe estar activada. El tiempo antes de disparar una tecla puede ajustarse libremente.

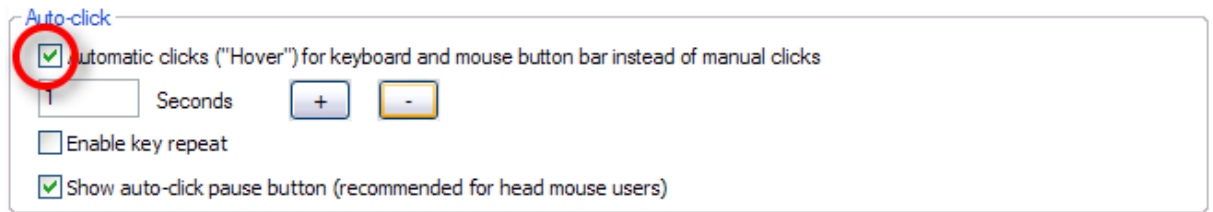

Botón de pausa de auto-click

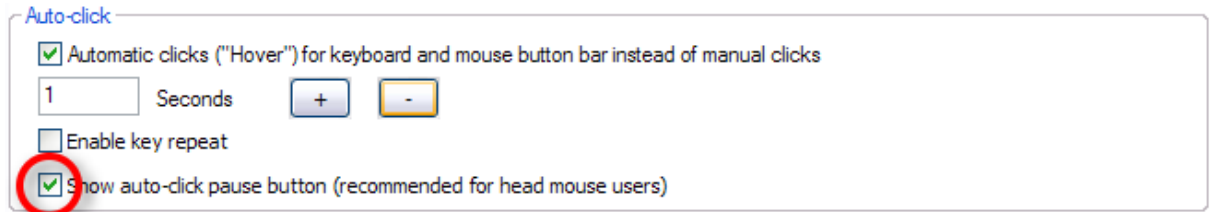

Usuarios con ratón de cabeza pueden beneficiarse de la función pausa de auto-click. Si se ha seleccionado esta opción, el botón de pausa -auto-click estará visible en el teclado. Si desea cambiar su posición en la silla o solo girar la cabeza, el cursor se moverá en la pantalla del computador debido al movimiento del cuerpo, y esto puede disparar teclas en el teclado indeseablemente. Al dar click una vez en el "Botón de pausa de auto-click", puede desactivar la función de auto-click del teclado hasta que este botón sea disparado nuevamente.

N	Ni	Nombre	Nuestro	Nivel
No	Nos	Nada	Nunca	Noticias

Predicción de Palabras

Tan pronto como haya escrito la primera letra de una nueva palabra, serán mostradas predicciones de palabra. Si la palabra deseada es mostrada, puede seleccionarla para escribir esta palabra.

OnScreenKeys provee una triple predicción de palabra. Esto significa que el software tratará de predecir la siguiente palabra. Tan pronto como vea la palabra deseada, puede seleccionarla.

Letra mayúscula / minúscula

Podría notar que OnScreenKeys esté tratando de colocar el estado correcto de letra mayúscula o minúscula para el teclado automáticamente. Puede disparar el botón de cambio shift para cambiar el estado de cambio shift manualmente.



Tecla de cambio shift

Note que las palabras que sean seleccionadas mediante uno de los botones de predicción de palabra serán escritas tal como aparecen en la pantalla. Puede colocar el estado de cambio shift con el botón de cambio shift antes de seleccionar una palabra.

Si desea cambiar la letra mayúscula / minúscula de la última palabra escrita puede seleccionar el siguiente botón:



Tecla de cambio shift para palabra



Corrección

Hay 3 funciones de borrar en el software:



Borrar último carácter

Use este botón para borrar el último carácter.



Borrar última palabra

Utilice este botón para borrar la última palabra

Otras teclas



Tecla de tabulación



Tecla de cambio shift para palabra



Tecla de cambio shift



Tecla de Escape



Bloq Mayús (Escritura permanente en mayúscula)



Windows



Tecla de macro de texto rápido



Eliminar palabra del diccionario del usuario: Una vez que escriba una palabra incorrectamente y no la haya corregido, esta aparecerá nuevamente en la predicción de palabra. Para borrar esta palabra, seleccione este botón, y luego de click en el botón que muestra la palabra incorrecta.



Bandeja de CD: Abre o cierra la bandeja de CD.



Botón de pausa de auto-click: Con este botón usted puede desactivar la función de autoclick en el teclado. Una vez desactivada, solamente este botón la puede volver a activar.



Configuración general



Minimizar



Salir



Voz: Activar / desactivar función de Parlantes

Teclas Extra, AltGr y Ctrl



Teclas extendidas

Al dar click en la tecla extra en el teclado virtual puede acceder a todas las funciones especiales que existen en un teclado normal.



Tecla AltGr

La tecla AltGr se usa para escribir caracteres especiales.



Tecla CTRL

La tecla Ctrl es usada para realizar "cortocircuitos".

El efecto de un cortocircuito depende de la aplicación con que se use.

Adaptación al teclado

Múltiples idiomas

La gente que habla múltiples idiomas se beneficiará de la "función de cambio de idioma" que permite cambiar rápidamente tanto el idioma para predicción de palabra como la disposición del teclado.

En defecto, el software usará el idioma que es usado en Windows.

Para cambiar el idioma temporalmente, dispere la siguiente tecla:



Seleccione el idioma deseado de una de las cajas de selección vacías, luego de click en "Activar".

Si desea cambiar de idioma del teclado nuevamente, debe usar el "botón de cambio de idioma" nuevamente, luego de click en el botón "Activar" al lado del el idioma deseado.



Idioma (Configuración general)


Para cambiar el idioma que se usará para los menús y diálogos de usuario, seleccione el idioma deseado en el menú de configuración.

Standard language for word prediction and menus

Language for menus and dialogs in this software. This language will also be as the primary language for word prediction.

Tamaño de teclado

El tamaño del teclado puede cambiarse en el menú de configuración.

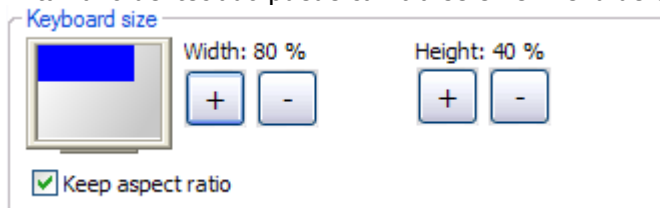

El rectángulo azul muestra el tamaño en relación a su pantalla de computador.

Tclas definidas por el usuario.

Hay 4 teclas en el teclado que pueden llenarse con cualquier contenido en el menú de configuración.

Typing

Additional letters to be displayed on the keyboard:



Salida de voz

Por favor tenga en cuenta que esta función solo estará disponible después del periodo de prueba del software si esta es parte de la licencia que ha comprado.

Con este botón usted puede activar o desactivar la salida de voz

Dependiendo del estado actual, los siguientes símbolos se muestran.



Salida de habla está desactivada.



Salida de habla está activada.



Salida de habla está desactivada debido a un error.

Si la función de salida de habla está activada, toda línea escrita será enviada al parlante luego de disparar la tecla enter.



Disparar nuevamente la tecla enter sin escribir nuevas palabras repetirá la última oración hablada. Esto puede servir si no fue entendido correctamente.

Hablar cada palabra

Si la función "Hablar cada palabra" está activada, cada palabra será enviada a la función de salida de habla inmediatamente después de escribirla.

Si esta opción no se ha activado, la última línea escrita será enviada a la salida de habla al disparar la tecla enter.

Para seleccionar una voz para salida de habla, puede ir al menú configuración y cambiar la voz asignada para un idioma específico.

Por favor, fíjese que deberá disparar el botón "Guardar voz" que está abajo a la derecha del campo de selección de voz luego de cambiar una combinación idioma - voz.

Si usa el software para más de un idioma, puede seleccionar una voz diferente para cada idioma.

Si cambia el idioma disparando la tecla de cambio de idioma, la voz que haya asignado para este idioma será seleccionada automáticamente para salida de habla.



Barra del ratón



Por favor tenga en cuenta que esta función solo estará disponible después del periodo de prueba del software si esta es parte de la licencia que ha comprado.

Si tiene dificultad para presionar los botones de un ratón real debería usar estos botones de ratón virtual.

Usar los botones del ratón virtual puede ser poco familiar al comienzo, por eso aquí está una corta explicación.

Primero que todo debe considerar que botón usaría en un ratón normal para hacer lo que desea.
Por ejemplo, para abrir un archivo de texto debería dar doble click izquierdo.
Seleccione el click de ratón deseado, luego mueva el puntero del ratón al lugar donde este click del ratón debe ejecutarse.

Funciones del ratón



Doble clic



Clic izquierdo



Clic derecho



Click Arrastrar/Soltar



Clicks repetidos arrastrar / soltar
(para juegos como p. ej. Solitario arácnido)



Desactiva y minimiza la barra de botones del ratón.



Maximiza la barra de botones del ratón.

2 valores pueden ser importantes para trabajar cómodamente con la función del click del ratón:



1) Tiempo de Espera

Tiempo de detención significa el periodo de tiempo antes que se ejecute un click del ratón en la posición actual del puntero del ratón.




2) Tolerancia de movimiento

Si tiene problemas en mantener el puntero del ratón quieto entonces debería aumentar la tolerancia al temblor.

Tamaño de barra de botón de mouse

El tamaño de la barra de botones del ratón se puede cambiar en el menú de configuración.

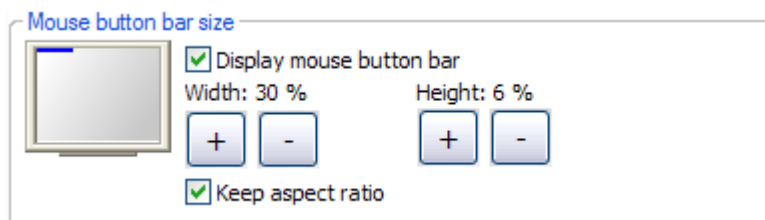


El rectángulo azul muestra el tamaño en relación a su pantalla de computador.

Compensación de espasticidades

Por favor tenga en cuenta que esta función solo estará disponible después del periodo de prueba del software si esta es parte de la licencia que ha comprado.

Hacer que el ratón real del computador ignore clicks.

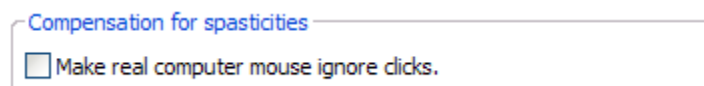

Esta opción causa que el ratón ignore los clicks.

Clicks del ratón por ejemplo en el escritorio solo pueden dispararse con la barra de click del ratón.

Esta opción puede compensar las espasticidades en la mano que pueden llevar a arrastres no deseados de archivos a por ejemplo la papelera de reciclaje.

Cuando esta opción haya sido activada, la tecla Escape en el teclado del computador puede usarse para desactivar o reiniciar la ignoración de clicks del ratón del computador.

Macros de Texto

Tecla de macro de texto rápido



Al disparar la 'tecla de macro de texto rápido', los títulos de los macros de texto rápido se exhibirán en el teclado.

Cuando dispara uno de estos títulos, los contenidos pre-asignados de este macro de texto será escrito.

Título y contenido de macros de texto pueden ser asignados o creados en el menú de configuración.

Puede por ejemplo crear un macro de texto con el título Despedida y asignar Hasta luego! como su contenido.

Macros de Texto

Debido a que 10 macros de texto rápido puede ser muy poco para un usuario entrenado, es posible adicionar más macros de texto que pueden ser llamados con cierta combinación de teclas.

Estos macros de texto pueden ser solicitados escribiendo "#" en el teclado.

Una forma posible de dar nombres a los macros de texto es usando abreviaturas.

Agrupar es una buena forma de mantener organizados claramente los macros de texto.

Por ejemplo todos los macros de texto relacionados con comida, deberían iniciar con 'Comida:' en su nombre.

De esta forma puede crear nombres fáciles de reconocer, como 'Comida: Ensalada', 'Comida: Pan', etc.



Vocabulario

OnScreenKeys provee un diccionario comprensible por defecto.

El software aprende nuevas palabras y oraciones una vez usted las haya escrito y las adopta a su estilo de escritura. Sin embargo, sería buena idea en algunos casos importar documentos propios para hacer que el software se adapte a su estilo de escritura inmediatamente.

Use la función de importar vocabulario en el menú de configuración para importar sus documentos de texto.

Extras

Autoiniciar

OnScreenKeys puede ser configurado de tal forma que inicie automáticamente cuando se inicie Windows.

Autostart

Open keyboard automatically when Windows® starts up

Color de esquema

El color de esquema del software puede cambiarse para compensar daños visuales.

Colors

Standard colors

Black/ White

Foreground color

Background color

Auto-click color



Preview



Sonido

Salida de sonido para disparar teclas puede ser activada o desactivada.

Sound

Play sound when keys are triggered



Detección de fallas

Por cualquier consulta o información adicional, escribanos a info@onscreenkeys.com