

ONSCREENKEYS 4

Windows XP® / Windows Vista® / Windows 7®

Description


Le logiciel OnScreenKeys est une technologie assistive pour les personnes qui ne peuvent pas employer un clavier commun ou une souris d'ordinateur due à une incapacité.

Le clavier virtuel OnScreenKeys fournit toutes les fonctions que vous emploieriez normalement sur un vrai clavier aussi bien que beaucoup d'autres dispositifs qui feront fonctionner n'importe quel ordinateur beaucoup plus facile.

Au lieu d'appuyer sur les touches d'un clavier normal, l'utilisateur juste déplace le curseur de la souris au-dessus des clefs sur le clavier virtuel et peut facilement écrire dans n'importe quel champ de textes sur l'écran de l'ordinateur.

OnScreenKeys fournit une fonction intégrée de clic de souris qui permettra à n'importe quel utilisateur de faire leurs propres clics de souris, même s'ils ne peuvent plus appuyer sur les boutons d'une souris normale.

Plusieurs caractéristiques intégrées facilitent l'utilisation de l'ordinateur. Le logiciel inclus une sortie vocale qui permet d'envoyer un texte vers le haut-parleur de l'ordinateur.

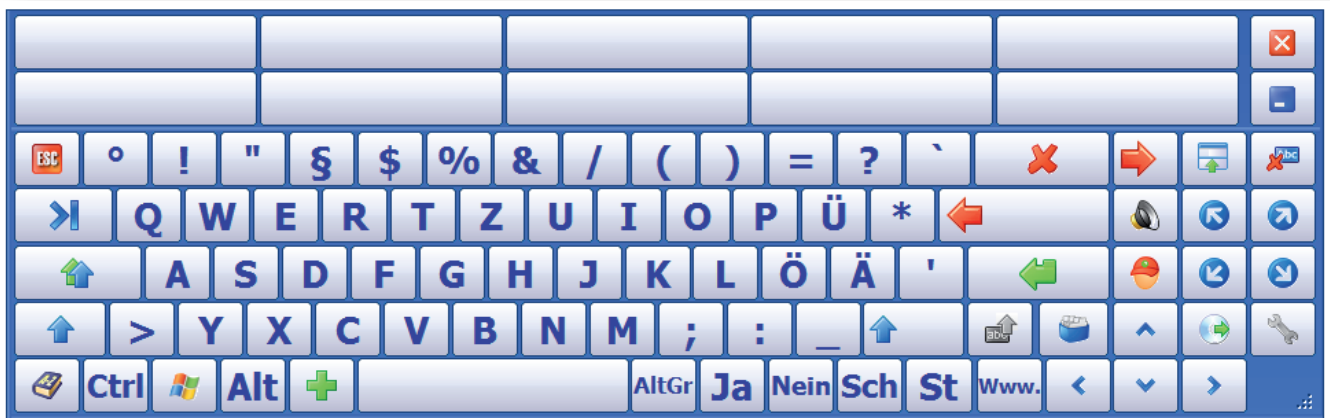

Installation

Si OnScreenKeys a été livré sur un CD, mettez le dans votre lecteur CD. L'installation démarrera automatiquement.

Si l'installation sur CD ne démarre pas automatiquement, le fichier OnScreenKeysSetup.exe sur le CD doit être démarré manuellement.

Premier démarrage

OnScreenKeys détecte automatiquement la langue configurée comme langue standard de votre Windows® et configure le logiciel automatiquement par cette langue.

Vous pouvez changer la langue du clavier ainsi que beaucoup d'autre configuration en accédant au menu de configuration par la touche réglage du clavier:



Taper

Fenêtre editeur de texte

Vous devez ouvrir une fenêtre d'insertion que vous allez utiliser pour insérer des textes. A titre de démonstration, une fenêtre d'insertion est ouverte automatiquement quand le logiciel démarre.

Il est possible de configurer tous les fichiers exécutables pour qu'ils démarrent automatiquement avec le lancement de OnScreenKeys.

Vous pouvez utiliser le traitement de texte de votre choix comme, Microsoft Word®, ou un logiciel de courrier électronique.


Veillez vous rappeler que (tout comme le clavier normal de l'ordinateur) le curseur doit clignoter dans la zone de frappe.



Taper

Comment cliquer sur les touches

Pour activer automatiquement les touches du clavier sans appuyer manuellement sur la touche du clavier, la fonction auto clic ("Hover") doit être activée. Le temps qui s'écoule avant que la touche soit activée peut facilement être ajusté.

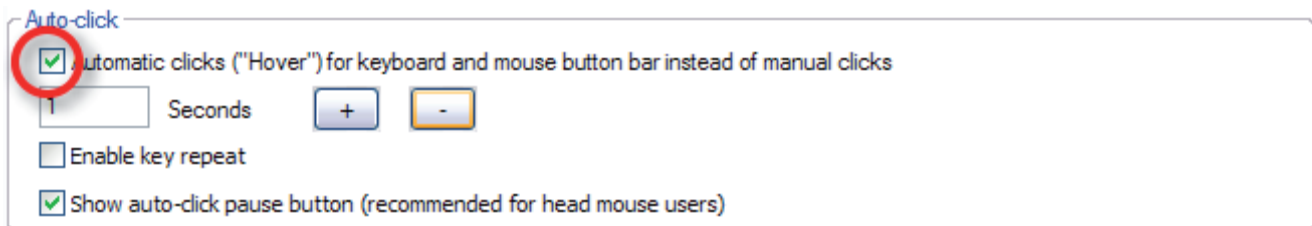

Touche auto clic pause

Les utilisateurs de souris tête peuvent profiter de la fonction auto clic pause. La touche auto clic pause s'affiche sur le clavier si cette option est sélectionnée.



Si vous voulez changer de position ou juste tourner la tête, le curseur de la souris se déplacera sur l'écran avec votre mouvement et peut activer des touches indésirables sur votre clavier. En appuyant une fois sur "la touche auto clic pause" vous pouvez désactiver la fonction auto clic jusqu'à ce que cette touche soit réactivée.

Prévision de Word

La prédiction des mots s'affiche une fois que vous tapez la première lettre d'un mot. Si le mot que vous désirez frapper apparaît, vous n'avez qu'à le sélectionner.

OnScreenKeys dispose une prédiction de mot à trois choix. Ceci veut dire que le logiciel essaye de prévoir le prochain mot. Dès que le mot que vous désirez frapper apparaît, vous n'avez qu'à le sélectionner.

A	A	Après	Aussi	Alors
Au	Avec	Aux	Avant	Avait

Taper

Majuscule/minuscule

Vous pouvez également constater que OnScreenKeys essaye de corriger automatiquement la majuscule et la minuscule du clavier. Vous pouvez activer la touche shift pour le changer manuellement.



Remarquez que les mots sélectionnés à partir de la touche prédiction de mot seront tapés exactement comme l'écran les a affichés. Vous pouvez configurer la casse avec la touche shift avant de sélectionner un mot.

Si vous voulez changer la casse du dernier mot frappé, vous pouvez sélectionner les touches suivantes:



Rectification

Il y a 2 types de suppressions dans le logiciel:

Supprimer le dernier caractère
Utilisez cette touche pour supprimer le dernier caractère.



Supprimer le dernier mot
Utiliser ce bouton pour supprimer le dernier mot.



Weitere Tasten



Touche modification de la casse



Verr. maj (Toujours une majuscule)



Touche texte macro rapide



Supprimer le mot sur le registre de mot de l'utilisateur: Si vous faites une frappe incorrecte sans l'avoir corrigée, ce mot apparaîtra encore dans la prédiction de mot. Pour le supprimer, sélectionnez cette touche puis cliquez sur la touche qui affiche le mot incorrecte.



Voix: Activer/désactiver la fonction voix

Langues multiples

La personne qui parle plusieurs langues peut profiter de la "fonction changement de langue" qui va lui permettre de rapidement changer en même temps la langue pour la prédiction de mot ainsi que la langue du clavier.

Le logiciel utilisera par défaut la langue standard de Windows®.

Pour changer temporairement la langue, activez les touches suivantes:

Sélectionnez la langue que vous désirez à partir de la boîte de sélection vide, puis appuyez sur la touche "Activer".


Si vous voulez changer la langue du clavier encore une fois, vous devez utiliser la "touche changement de langue" encore une fois et appuyez sur la touche "Activer" à côté de la langue que vous désirez.



Dimension clavier


La taille du clavier peut être changée dans le menu de configuration.

Le rectangle bleu montre la taille par rapport à l'écran de votre ordinateur.

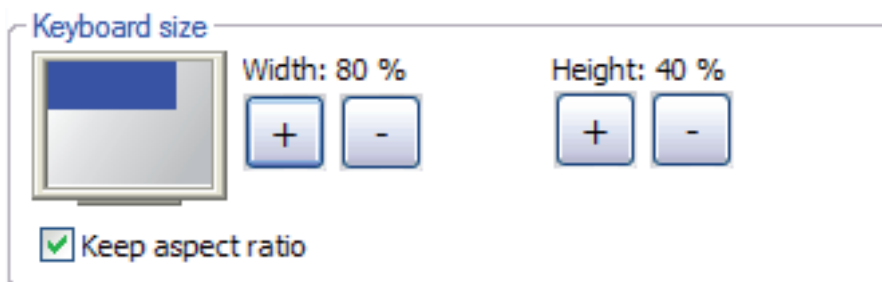

Touches personnalisées

Il y a 4 touches personnalisables avec n'importe quel contenu par le menu de configuration sur le clavier.

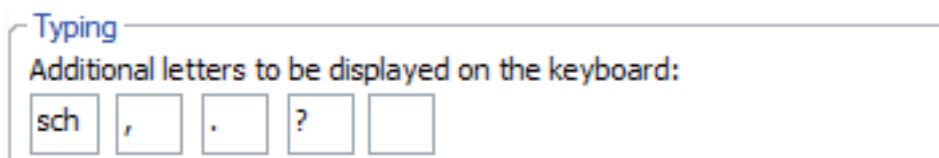

Sortie pour la voix

Veillez noter que cette fonction n'est disponible qu'après la version essaie de votre logiciel s'il fait partie de la licence que vous avez achetée.

Si la fonction sortie voix est activée, toutes les lignes tapées seront envoyées dans le générateur de voix en appuyant sur la touche enter.

L'activation de la touche entrer sans nouveaux mots retournera la dernier phrase.



Lire chaque mot

Si l'option "Lire chaque mots" est activée, chaque mot sera envoyé vers la fonction voix immédiatement après chaque frappe.

Barre de bouton de la souris

Veillez noter que cette fonction n'est disponible qu'après la version essaie de votre logiciel s'il fait partie de la licence que vous avez achetée.

Si vous avez de difficulté à appuyer sur la touche de la souris, utilisez la touche de la souris virtuelle.

L'utilisation de la souris virtuelle peut vous mettre mal à l'aise au début, voici quelque explication.

D'abord vous devez choisir la touche que vous utilisez avec une souris normale.

Pour ouvrir un fichier texte par exemple, vous faites un double clic sur la touche gauche. Sélectionnez la façon de faire un clic avec la souris puis déplacez le pointeur sur l'emplacement où vous voulez exécuter le clic.



Pour travailler confortablement avec la fonction clic de la touche de la souris, 2 valeurs sont à retenir:



Temps d'angle de saturation

Le temps de retard programmé est le temps qui s'écoule avant que le clic de la souris soit activé sur la position actuelle du pointeur.



Tolérance de mouvement

Si vous avez du problème à stabiliser le pointeur de la souris, vous devez augmenter la tolérance de tremblement.



Texte makros

Touche texte macro rapide

En activant la 'touche texte macro rapide', les titres des textes macros rapides apparaissent sur le clavier.



En activant ces titres, les tâches pré attribuées à ce texte macro seront frappées. Le titre et les contenus des textes macros sont attribuables dans le menu de configuration.

Vous pouvez par exemple créer un texte macro avec le titre 'Adieu' et attribuer 'Goodbye!' à son contenu.

Texte makros

Puisque 10 textes macros peuvent sembler trop simple pour un utilisateur qualifié, il est possible d'ajouter des textes macros supplémentaires activables par une combinaison de touche.



La requête de texte macro peut se faire en appuyant sur la touche "#" du clavier. Les abréviations sont une autre façon de nommer un texte macro.


Le groupement est une bonne façon de bien arranger vos textes macros.

Tous les noms de texte macro relatif à la nourriture doivent commencer par le mot 'Nourriture:' par exemple.

De cette façon il est facile de créer des noms facilement identifiables comme, 'Nourriture:Salade', 'Nourriture:Pain', etc.

Autostart

OnScreenKeys peut être configuré pour qu'il démarre automatiquement avec le lancement de Windows®.

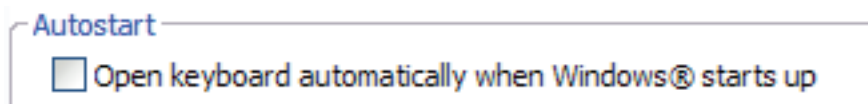

updates

<http://www.onscreenkeys.com>

activation

<http://www.onscreenkeys.com/activation>

developer contact

tom weber software
Konrad-Adenauer-Ring 18
69214 Eppelheim
Germany

tel. 0049 6221-431055-0
fax. 0049 6221-651244-5
mail@onscreenkeys.com

seller contact / sale information
