

OnScreenKeys Manuale utente



Descrizione

Il software OnScreenKeys è una tecnologia assistenziale per persone che non possono usare normali tastiere e mouse in seguito a una disabilità.

La tastiera virtuale fornisce tutte le funzioni che si trovano normalmente in una tastiera reale, più altre caratteristiche che renderanno qualunque lavoro al computer più facile.

Invece di premere i tasti su una normale tastiera, l'utente muove il cursore del mouse sui tasti della tastiera virtuale e può facilmente scrivere in qualunque campo di testo sullo schermo del computer.

OnScreenKeys fornisce una funzione integrata di click del mouse, che permette ad ogni utente di eseguire dei click del mouse da soli, anche se non sono in grado di premere i pulsanti di un normale mouse.

Ulteriori funzioni integrate renderanno più facile il lavoro al computer.

Il software comprende una voce in uscita integrata, che può essere utilizzata per inviare testi scritti agli altoparlanti del computer. E' possibile integrare voci aggiuntive fornite da altre aziende come AT&T, Acapela.



Installazione

Installazione da CD

Se OnScreenKeys è stato consegnato su CD, inseriscilo nell'unità CD-ROM del computer. L'installazione partirà automaticamente.

Se l'installazione non parte automaticamente:

Se l'installazione da CD non parte automaticamente, OnScreenKeysSetup.exe sul CD deve essere avviato manualmente.

Primo avvio

OnScreenKeys riconosce automaticamente quale lingua hai specificato come lingua standard in Windows® e configura di conseguenza questo software automaticamente.

Puoi cambiare la lingua dalla tastiera oltre ad altre impostazioni accedendo al menu configurazione, nel quale puoi entrare usando il pulsante impostazioni della tastiera:



Scrivendo

Finestra di editor del testo

Devi aprire una finestra di testo nella quale poter scrivere. Per scopi dimostrativi viene automaticamente aperta una finestra di testo all'avvio del software.

Ogni file eseguibile può essere impostato per partire automaticamente quando OnScreenKeys è avviato.


Puoi scrivere in qualsiasi editor di testo a tuo piacere, ad esempio Microsoft Word®, o software di posta elettronica.

Ricorda che (come quando scrivi con una normale tastiera per computer) il cursore deve lampeggiare all'interno della finestra.




Come cliccare tasti e bottoni

Per attivare automaticamente tasti della tastiera senza premere il pulsante del mouse manualmente, deve essere attivata la funzione auto-click ("Hover"). L'intervallo di tempo prima che un tasto sia attivato può essere liberamente impostato.

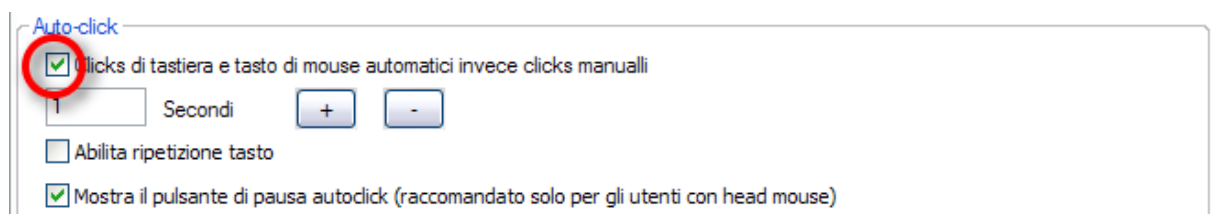

Pulsante pausa auto-click

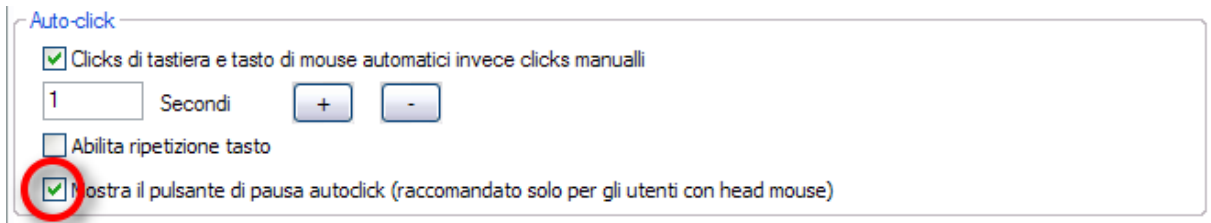

Gli utenti del head mouse possono beneficiare della funzione pausa auto-click. Se questa opzione è stata selezionata, il bottone pausa auto-click sarà visibile sulla tastiera. Se vuoi cambiare la posizione sulla sedia o semplicemente girare la testa, il puntatore del mouse si sposterà oltre lo schermo del computer a causa del movimento del corpo, e ciò potrebbe provocare attivazioni indesiderate di tasti sulla tastiera. Cliccando il "pulsante pausa Auto-click" una volta, puoi disattivare la funzione Auto-click della tastiera fino a quando il pulsante non è nuovamente attivato.

D	Del	Da	Delle	Degli
Di	Della	Dei	Dal	Dopo

Previsione di parole

Appena scrivi la prima lettera di una nuova parola, sarà visualizzata la parola prevista. Se è visualizzata la parola desiderata, devi solo selezionarla per scriverla.

OnScreenKeys fornisce una triplice previsione di parola. Questo vuol dire che il software proverà a prevedere la prossima parola in arrivo. Appena vedi la parola desiderata, puoi selezionarla.

Maiuscolo/minuscolo

Probabilmente sarai informato che OnScreenKeys sta provando a impostare correttamente la tastiera maiuscolo o minuscolo in automatico. Puoi attivare il pulsante shift per cambiare manualmente lo stato dello shift.



Tasto shift

Nota che le parole selezionate scegliendo uno dei bottoni delle parole previste saranno scritte nel modo in cui sono visualizzate sullo schermo. Puoi impostare lo stato dello shift con il pulsante shift prima di selezionare una parola.

Se vuoi cambiare il carattere dell'ultima parola scritta puoi selezionare il seguente pulsante:



Tasto shift parola



Correzione

Sono presenti nel software 3 funzioni di cancellazione:



Cancella l'ultimo carattere

Usa questo pulsante per cancellare l'ultimo carattere.



Cancella l'ultima parola

Usa questo pulsante per cancellare l'ultima parola

Altri tasti



Tasto tabulazione



Tasto shift parola



Tasto shift



Tasto Esc



BLOC MAIUSC (Scrittura tutto maiuscolo)



Windows



Tasto rapido macro di testo



Cancella la parola dal vocabolario utente: Se non correggi una parola una volta scritta errata, apparirà di nuovo nella previsione di parola. Per cancellare questa parola, seleziona questo pulsante e poi provoca un click del pulsante che visualizza la parola errata.



Cassetto CD: Apre o chiude il cassetto CD.



Pulsante pausa auto-click: Con questo pulsante puoi disattivare la funzione di autoclick nella tastiera. Una volta che l'autoclick è disattivato, solo questo pulsante lo riattiverà di nuovo.



Configurazione generale



Ridurre a icona



Termina



Voce: Attiva/disattiva la funzione uscita voce

Extra-, AltGR- e Ctrl-Tasto



Tasti estesi

Cliccando il tasto extra sulla tastiera virtuale puoi accedere a tutte le funzioni speciali esistenti in una normale tastiera.



AltGr-tasto

Il tasto AltGr è utilizzato per scrivere caratteri speciali.



Tasto CTRL

Il tasto Ctrl è utilizzato per fare le cosiddette "scorciatoie".
L'effetto di una scorciatoia dipende dall'applicazione in cui è utilizzata.

Adattamento della tastiera

Lingue multiple

Persone che parlano più lingue potranno beneficiare della "funzione cambia lingua" che permette di cambiare rapidamente sia la lingua per la previsione parola sia la configurazione di tastiera.


Il software utilizzerà come predefinita la lingua già utilizzata in Windows®.



Per cambiare temporaneamente la lingua, attivare il seguente tasto:

Seleziona la lingua desiderata da una delle celle di selezione vuote, poi click "Attiva".

Se vuoi cambiare di nuovo la lingua della tastiera, devi usare nuovamente il "pulsante cambia lingua", poi clicca sul pulsante "Attiva" a fianco della lingua desiderata.

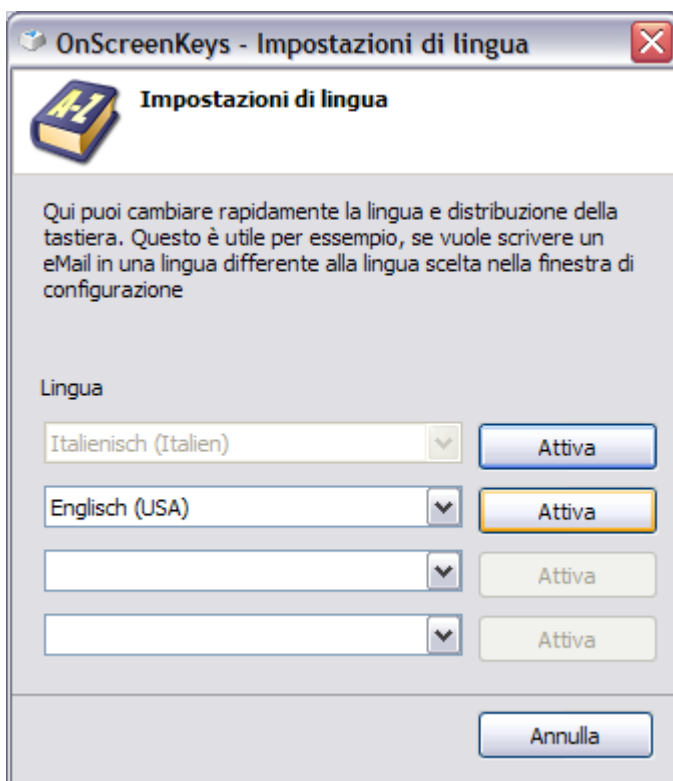

Lingua (Configurazione generale)

Per cambiare la lingua che sarà utilizzata per menu utente e dialoghi, seleziona la lingua desiderata nel menu configurazione.


Lingua standard per previsione di parole e menù

Italienisch (Italien) ▼

Per favour selezione la lingua che sarà usata per mostrare i menù e i dialogui in questo software. Questa lingua anche sarà usata per previsione di parole che scriva nella sua tastiera

Dimensione di tastiera


La dimensione della tastiera può essere cambiata nel menu configurazione.

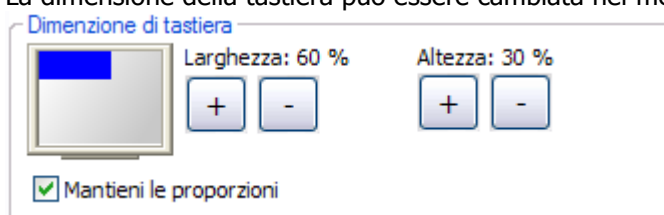

Il rettangolo blu visualizza la dimensione in relazione al tuo schermo del computer.

Tasti definiti dall'utente

Sulla tastiera sono presenti 4 tasti che possono essere riempiti con qualsiasi contenuto nel menu configurazione.

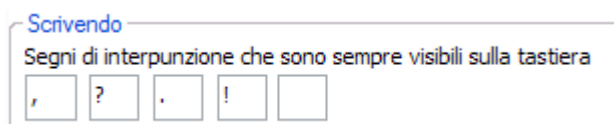

Output parlato

Nota bene che questa funzione sarà disponibile dopo il periodo di prova del software solo se sarà parte della licenza che hai comprato.

Con questo pulsante potete attivare o disattivare la funzione di output parlato.

A seconda dello stato corrente, sono visualizzati i seguenti simboli.



L'uscita voce è disattivata.



L'uscita voce è attivata.



L'uscita voce è disattivata a causa di un errore.

Se la funzione uscita voce è attivata, ogni riga scritta sarà inviata al motore vocale quando è attivato il tasto invio.



Attivare di nuovo il tasto enter senza scrivere nessuna nuova parola ripeterà l'ultima frase pronunciata. Questo può risultare comodo se non hai capito correttamente.

Pronuncia ogni singola parola

Se l'opzione "pronuncia parola singola" è attivata, ogni parola sarà inviata alla funzione uscita voce immediatamente dopo averla scritta.

Se questa opzione non è stata attivata, l'ultima linea scritta sarà inviata all'uscita voce quando attivato il tasto enter.

Per selezionare una voce per l'uscita voce, puoi andare al menu configurazione e cambiare la voce assegnata alla specifica lingua.

Nota bene che dovrai attivare il pulsante "Salva voce" che troverai a destra sotto al campo seleziona voce dopo aver cambiato una combinazione lingua-voce.

Se stai usando il software con più di una lingua, puoi selezionare una differente voce per ogni lingua.

Se cambi la lingua della tastiera attivando il tasto cambia lingua, la voce che hai assegnato a questa lingua sarà automaticamente selezionata per l'uscita voce.



Barra dei pulsanti del mouse



Nota bene che questa funzione sarà disponibile dopo il periodo di prova del software solo se sarà parte della licenza che hai comprato.

Se riscontri difficoltà premendo i pulsanti del mouse reale dovresti utilizzare questi pulsanti del mouse virtuale.

Utilizzare i pulsanti del mouse virtuale potrebbe essere un po' scomodo all'inizio, pertanto qui trovi una breve spiegazione.

Innanzitutto dovresti considerare quale pulsante vorresti usare su un mouse normale per fare ciò che vuoi fare.

Ad esempio, per aprire un file di testo potresti voler fare un doppio click sinistro.

Seleziona il click del mouse desiderato, poi sposta il puntatore del mouse alla posizione dove questo click del mouse dovrebbe essere eseguita.

"Funzione di click mouse




Doppio click



Click sinistro



Click destro

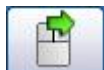

Click Drag/Drop



Click trascinabile/rilascia ripetuti
(for games like e. g. Spider Solitaire)



Disattiva e riduce la barra del bottone del mouse.



Ingrandisci la barra del bottone del mouse.

2 valori possono essere importanti per lavorare comodamente con la funzione click del mouse:



1) **Tempo di dimora**

Tempo Dwell significa l'intervallo di tempo prima che sia effettuato un click del mouse alla corrente posizione del puntatore.




2) **Tolleranza del movimento**

Se riscontri problemi a mantenere il puntatore del mouse fermo dovresti aumentare la tolleranza al tremore.

Dimensione di barra di tasto di mouse

La dimensione della barra del bottone del mouse può essere cambiata nel menu configurazione.

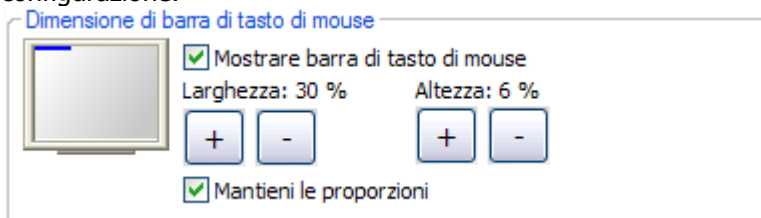


Il rettangolo blu visualizza la dimensione in relazione al tuo schermo del computer.

Compensation for spasticities

Nota bene che questa funzione sarà disponibile dopo il periodo di prova del software solo se sarà parte della licenza che hai comprato.

Make real computer mouse ignore clicks.

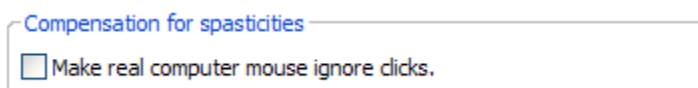

This option causes the mouse to ignore clicks.

Mouse clicks on e. g. the desktop can only be triggered by the mouse click bar.

This option can compensate for spasticities in hand which may lead to unwanted dragging of files into e. g. the recycle bin.

When this option has been activated, the Escape key on the computer keyboard can be used to deactivate or to resume the ignoring of mouse clicks of the computer mouse.

Macro di testo

Tasto rapido macro di testo



Attivando il 'tasto rapido macro di testo', i titoli delle macro di testo rapide saranno visualizzati nella tastiera.

Quando attivi uno di questi titoli, saranno scritti i contenuti preassegnati di questa macro di testo.

Titolo e contenuti delle macro di testo possono essere assegnati o creati nel menu configurazione.

Puoi ad esempio creare una macro di testo con il titolo 'Addio' ed assegnare 'Arrivederci!' come suoi contenuti.

Macro di testo

Poichè 10 macro di testo rapide possono essere un po' poche per un utente esperto, è possibile aggiungere ulteriori macro di testo che possono essere attivate da determinate combinazioni di tasti.

Queste macro di testo possono essere richiamate scrivendo "#" sulla tastiera.

Un modo possibile per assegnare nomi di macro di testo è utilizzare abbreviazioni.

Raggruppare è un buon modo per manenere le tue macro di testo organizzate con chiarezza.

Ad esempio tutte le macro di testo relative al cibo, possono iniziare con 'Cibo:' nel loro nome.

In questo modo puoi creare nomi che possono essere facilmente riconosciuti, come "Cibo:Insalata", "Cibo:Pane", ecc.



Vocabolario

OnScreenKeys fornisce un dizionario completo predefinito.

Questo software impara nuove parole e frasi come tu le scrivi ed adotta il tuo stile di scrittura.

In ogni caso, potrebbe essere una buona decisione in alcuni casi importare propri documenti per far adattare immediatamente il software al tuo stile di scrittura.

Usa la funzione importa vocabolario nel menu configurazione per importare i tuoi documenti di testo.

Extras

Auto Iniziare

OnScreenKeys può essere configurato in modo che parta automaticamente all'avvio di Windows®.

Auto Iniziare

Apri la tastiera automaticamente alla partenza di Windows

Combinazione colori

Lo schema di colori del software può essere cambiato per compensare una riduzione della vista.

Colori


Colori standard

Bianco/Nero


Colore primo piano

Colore di sfondo

Colore auto-click

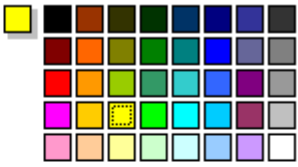

Anteprima



Suono

L'uscita del suono per attivazione tasti può essere attivata o disattivata.

Sound

Play sound when keys are triggered



Risoluzione problemi

Per ogni altra richiesta o informazione siete pregati di spedire una e-mail a info@onscreenkeys.com.