

ONSCREENKEYS 4

Windows XP ® / Windows Vista ® / Windows 7 ®

Beschrijving


De software OnScreenKeys is een ondersteunende technologie voor mensen die geen gebruik kunnen maken van een computer toetsenbord of muis door een handicap.

Het virtuele toetsenbord biedt alle functies die je normaal zou gebruiken op een echt toetsenbord en daarnaast nog veel meer kenmerken die het werken met elke computer vergemakkelijken.

In plaats van het indrukken van de toetsen van een normaal toetsenbord, kan de gebruiker de aanwijzer van de muis over de toetsen van het virtuele toetsenbord bewegen en kan dan in elk tekst veld op het computer scherm schrijven.

OnScreenKeys is voorzien van een geïntegreerde muis klik functie die het een gebruiker mogelijk maakt om zelf muisklikken te doen, zelfs als ze zelf niet meer in staat zijn om een van de knoppen van de muis in te drukken.

Veel meer geïntegreerde opties zullen het werken met de computer makkelijker maken. De software is inclusief een geïntegreerde stem uitvoer, welke gebruikt kan worden om geschreven tekst naar de computer luidspreker te sturen.

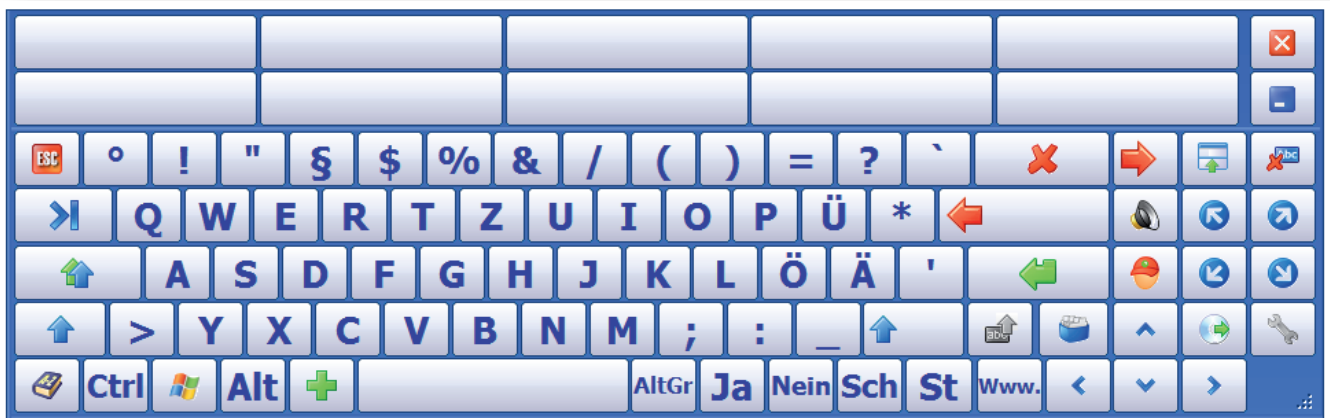

Installatie

Als OnScreenKeys per CD was geleverd, doe deze dan in uw computer's CD-ROM lade. De installatie start automatisch.

Als de installatie van de CD niet automatisch start, voer dan OnScreenKeysSetup.exe handmatig uit vanaf de CD.

Eerste start

OnScreenKeys dedecteerd automatisch welke taal je hebt ingesteld als de standaard taal in Windows® en configureerd deze software aan de hand daarvan automatisch.

U kunt de taal die u heeft ingesteld voor het toetsenbord en vele andere instellingen veranderen in het configuratie menu, welke u kunt benaderen door het gebruiken van de instellingen knop op het toetsenbord.



Typen

Tekst verwerker venster

U moet een tekstvenster openen waar u in kunt typen. Voor demonstratie doeleinden word er automatisch een venster geopend wanneer de software gestart wordt.

Elk uitvoerbaar bestand kan worden ingesteld om te starten wanneer OnScreenKeys gestart word.

U mag in elke tekst-editor naar keuze typen, bijvoorbeeld, Microsoft Word®, of in E-Mail software.


Alstublieft onthoudt dat (net als bij het typen op een normaal computer toetsenbord) de cursor binnen het venster moet staan.



Typen

Hoe toetsen en knoppen aan te klikken

Om toetsen automatisch aan te slaan op het toetsenbord zonder de muisknoppen handmatig in te drukken, moet de optie auto-klik functie ("Zweven") geactiveerd zijn. De tijd voor een toets word ingedrukt kan vrij worden aangepast.

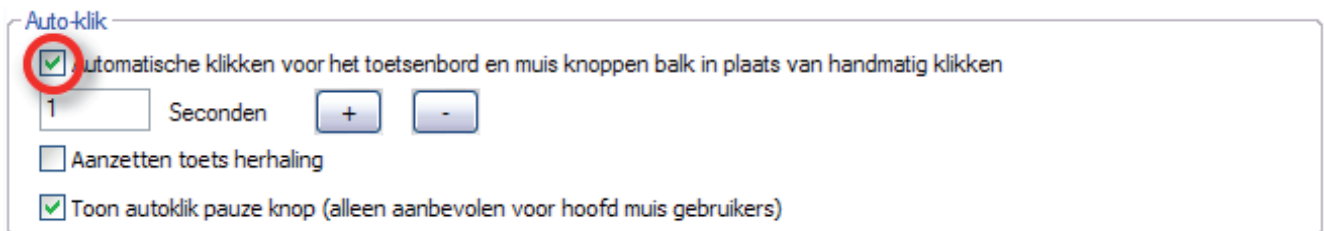

Auto-klik pauze knop

Hoofd muis gebruikers kunnen voordeel halen uit de auto-klik pauze functie. Als deze optie is geselecteerd, word de auto-klik pauze knop zichtbaar op het toetsenbord.



Als u de positie in een stoel veranderd of toevallig het hoofd beweegt, dan beweegt de muiscursor over het scherm door de lichaamsbeweging, en dit kan ongewenst toetsen op het toetsenbord aanslaan. Door het eenmaal aanklikken van de "Auto-klik pauze knop", kunt u het toetsenbord's Auto-klik functie uitschakelen todat de knop weer word ingeschakeld.

Woord voorspelling

Zodra u uw eerste letter getypt heeft van een nieuw woord, word een voorspellende aanvulling alvast getoont. Als de juiste woord-voorspelling zichtbaar is, kun u deze selecteren om hem te typen.

OnScreenKeys geeft een driedubbele woord voorspelling. Dit betekend dat de software een voorspelling probeerd te doen van het opvolgende woord. Zodra u het gewenste woord ziet, kunt u deze selecteren.

H	Heeft	Hebben	Heb	Hier
Het	Haar	Hirsi	Hij	Had

Typen

Hoofd/ kleine letter

Mischien is het u opgevallen dat OnScreenKeys probeert om de juiste hoofd en kleine letter plaats automatisch in te stellen. U kunt handmatig de shiftknop indrukken om de shiftstatus te veranderen.



Let er op dat woorden welke geselecteerd zijn door een van de woord-voorspellingen te kiezen getypt worden precies zoals ze zijn weergegeven op het scherm. U kunt de shiftstatus instellen met de shiftknop voordat u een woord selecteert.

Als u de hoofdletter van het laatst getypte woord wilt veranderen mag u de volgende knop gebruiken:



Correctie

Er zijn 2 verwijder functies in de software:

Verwijder laatste karakter
Gebruik deze toets om de laatste letter te verwijderen.



Verwijder laatste woord
Gebruik deze knop om het laatste woord te verwijderen.



Andere toetsen



Woord shift toets



Caps Lock (Continue hoofdletters typen)



Snelle tekst-makro toets



Verwijder woord uit het gebruikers woord boek: Als u eens een woord verkeerd heeft getypt en daarna niet gecorrigeerd, zal het weer verschijnen in het woordvoorspellen.

Om dit woord te verwijderen, selecteer dan deze toets, en veroorzaak een klik op de toets die een verkeerd woord laat zien.



Stem: Activeer / deactiveer spraak uitgangsfunctie

Meerdere talen

Gebruikers die meerdere talen spreken hebben profijt van de "talen aanpas functie" welke zowel de taal voor woord-voorspelling en keyboard layout snel veranderd.

Standaard, zal de software de taal gebruiken die ook gebruikt word in Windows®. Om de taal tijdelijk te veranderen, sla dan de volgende toets aan:




Kies de gewenste taal uit een van de lege selectie boxen, klik dan op "Activeer". Als u weer de taal wilt veranderen van het toetsenbord, gebruik dan nogmaals de "taal verander toets", daarna klik op de "Activeer" knop naast de gewenste taal.

Toetsenbord grote


De grootte van het toetsenbord kan veranderd worden in het instellingen menu.

De blauwe rechthoek laat de grootte in verhouding met uw computerscherm zien.

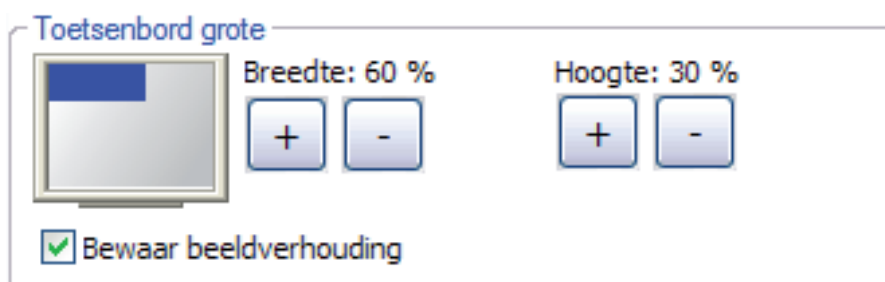

Gebruiker-gedefiniëerde toetsen

Er zijn 4 toetsen op het toetsenbord welke ingevuld kunnen worden met elke inhoud uit het configuratie menu.

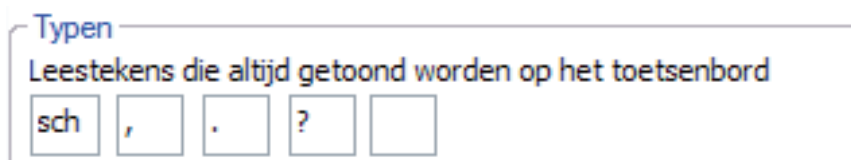

Spraak uitvoer

Let er op dat deze functie alleen beschikbaar is na de evaluatie periode van de software als dit onderdeel is van de licentie die u heeft gekocht.

Als de spraak weergave functie word geactiveerd, wordt elke getypte regel verzonden naar de spraakmachine wanneer de enter toets word ingedrukt.

Het opnieuw indrukken van de enter toets zonder dat er nieuwe woorden zijn getypt zorgt ervoor dat de laatst gesproken zin word herhaald.



Spreek elk los woord uit

Als de optie "Spreek losse woorden" is geactiveerd, wordt elk woord onmiddellijk na het typen naar de spraak weergave functie gestuurd.

Muis knoppen balk

Let er op dat deze functie alleen beschikbaar is na de evaluatie periode van de software als dit onderdeel is van de licentie die u heeft gekocht.

Als u moeite heeft met het indrukken van de knoppen van een echte muis dan kunt u deze virtuele muis knoppen gebruiken.

Het gebruik van virtuele muisknoppen kan wat vreemd overkomen in het begin, dus hier is een korte uitleg.

Ten eerste moet u bedenken welke knop u zou gebruiken op een normale muis om te doen wat u wilt doen.

Bijvoorbeeld, om een tekstbestand te openen moet je een dubbele linker muisklik geven. Selecteer de gewenste muisklik, beweeg dan je muis aanwijzer naar de locatie waar de klik moet worden uitgevoerd.



2 waardes zijn misschien belangrijk bij het comfortabel werken met de muisklik functies:



Rust tijd

Sleep tijd betekend de tijd voor een muisklik gedaan word op de muis aanwijzer zijn huidige positie.



Bewegings tolerantie

Als u moeite heeft met het stilhouden van de muis aanwijzer kunt u het beste de trillingen tolerantie verhogen.



Tekst macros

Snelle tekst-makro toets

Door het activeren van de 'snelle tekst-macro knop', worden de titels van de snelle tekst-macro's afgebeeld op het toetsenbord.



Wanneer u een van deze titels activeerd, word de vooringestelde inhoud van de tekstmacro getypt.

Titels en inhoud van de tekst-macro's kunen worden ingesteld of gemaakt in het instellingen menu.

U kunt bijvoorbeeld een tekst-macro maken met deze titel Vaarwel en Tot ziens! toekennen als de inhoud.

Tekst macros

Omdat 10 snelle tekst-macro's wat te weinig kunnen zijn voor een getrainde gebruiker, is het mogelijk om nog meer tekst-macro's toe te voegen welke gebuikt kunnen worden met verschillende toetsen combinaties.



Deze tekst macro's kunnen worden opgevraagd door "#" in te typen op het toetsenbord.


Een mogelijke manier om tekst-macro's een naam te geven is gebruik te maken van afkortingen.

Groeperen is een goede manier om uw tekst-macro's duidelijk in te delen. Bijvoorbeeld alle tekst-macro's welke zijn gerelateerd aan eten, te laten beginnen met 'Eten': in hun naam.

Op deze manier kun je namen maken die makkelijk te herkennen zijn, zoals 'Eten:Salade'. 'Eten:Brood', etc.

Autostart

OnScreenKeys kan worden geconfigureerd om te starten wanneer Windows® word gestart.

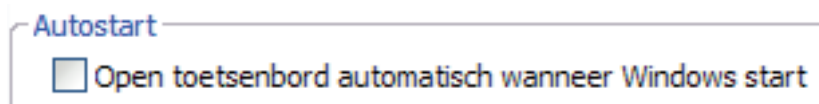

updates

<http://www.onscreenkeys.com>

activation

<http://www.onscreenkeys.com/activation>

developer contact

tom weber software
Konrad-Adenauer-Ring 18
69214 Eppelheim
Germany

tel. 0049 6221-431055-0
fax. 0049 6221-651244-5
mail@onscreenkeys.com

seller contact / sale information
